

Kurzanleitung: Wie funktioniert die Pflegebrille?

Starten mit der Brille: Schalten Sie zunächst die Pflegebrille an, indem Sie die rot markierten Stellen berühren bzw. den Knopf drücken. Melden Sie sich anschließend mit ihrem persönlichen QR-Code an.


Anschalten der Brille



Anmelden



Bedienung der Menüs: Der ausgewählte Menüpunkt ist grün hinterlegt und vergrößert. Mit der Nicken-Geste (siehe Rückseite) können Sie die Auswahl bestätigen. Links und rechts sehen Sie weitere Auswahlmöglichkeiten. Mit der Neigen-Geste können Sie diese auswählen.

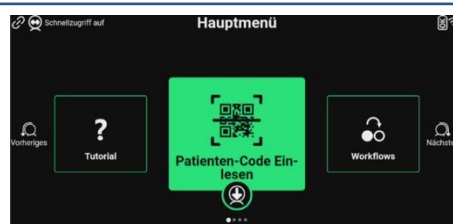


Patienten-Code einlesen: Hier können Sie den QR-Code eines Patienten einscannen und können sich anschließend verschiedene Informationen dieses Patienten anschauen.

Anruf: Unter diesem Menüpunkt können Sie einen Experten anrufen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie entweder ein Headset angeschlossen haben oder die Lautstärke richtig einstellen. Dies geschieht indem Sie mit 2 Fingern auf dem unten markierten Feld nach oben bzw. unten „wischen“.



Schnellzugriff-Menü: Das Schnellzugriff-Menü ist von überall erreichbar mit Hilfe der Kopfschütteln Geste. Dieses bietet weitere Optionen, als auch die Möglichkeit einen Schritt zurück zu gehen.

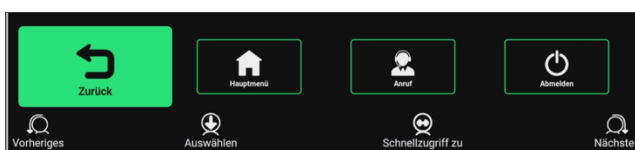

Abmelden: Um sich von der Brille abzumelden, gehen Sie im Schnellzugriff-Menü (Kopfschütteln-Geste) auf die Auswahl „Abmelden“ und bestätigen Sie diese (Nicken Geste). Bringen Sie die Pflegebrille zurück zur Ladestation, desinfizieren Sie diese und laden Sie diese wie unten gezeigt auf.



Gesten: Wie bediene ich etwas in der Pflegebrille?

Alle Funktionen der Pflegebrille sind durch Kopfbewegungen bedienbar, damit Ihre Hände für Ihre Arbeit frei bleiben. Unten erklären wir Ihnen die Kopfbewegungen, die in der Pflegebrille **Gesten** genannt werden.

Nicken (Bestätigen)



Die Nicken-Geste ist natürliches, deutliches, aber angenehmes Nicken mit der Pflegebrille. Sie wird für das **Bestätigen** der Durchführung einer Tätigkeit oder das Bestätigen einer Auswahl benötigt.



Neigen Links/Recht (Auswählen)





Die Neigen-Gesten ist eine deutliche, aber angenehme Neigung des Kopfes nach Links bzw. Rechts und wieder zurück. Mit dieser Geste kann man sich **zwischen Auswahlmöglichkeiten hin und her bewegen** und **durch Informationen blättern**.



Kopfschütteln (Abbrechen, Schnellzugriff)



Die Kopfschüttel-Geste wird durch das Schütteln des Kopfes (zügige Links-Rechts-Bewegungen und wieder zurück) ausgelöst. Damit kann in der Pflegebrille jederzeit ein Menü mit Schnellauswahl-Optionen aufrufen.

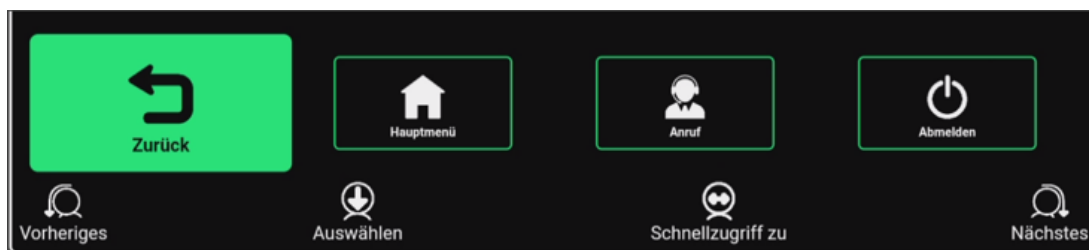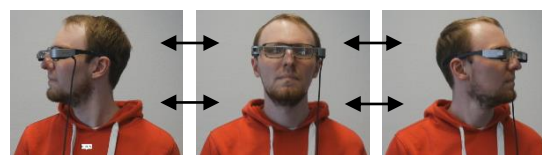

Im Menü finden Sie, je nachdem von wo Sie es in der Pflegebrille aufrufen Menü, unterschiedliche Schnellauswahl-Optionen wie die Funktionen „Zurück“, „Hauptmenü“, „Anruf“, für den **Anruf von Kollegen oder Experten** und „Abmelden“, um die Pflegebrille gesperrt absetzen zu können.

Ansprechpartner bei Fragen:

Bei Fragen/Feedback zur Pflegebrille:	Für technische Unterstützung:	Generell für Feedback zur Pflegebrille offen: Marc Janßen marc.janssen@tu-clausthal.de
---------------------------------------	-------------------------------	--